



# LÍNEA ENCAPSULADORA DE SOFTGELES DE ACEITE CANNABIS

REPRESENTACIÓN 2020

# Nueva tecnología doble

CÁPSULAS DE VEGAN AGAR & GELATINA CANNABIS OIL SOFTGEL

## EQUIPO

Vendemos la línea de equipos para la producción de aceite de CANNABIS y cápsulas de gel blando de aceite de Cannabis

## TECNOLOGÍA

Código fuente abierto.  
Patente libre.  
Sin restricciones.

## CONDICIÓN

Libre de derechos. Las materias primas están disponibles en el mercado abierto.

E

T

C

P

G

S

## PRODUCTO


CBD, Cannabis, cáñamo y cápsulas de gelatina blanda de aceite de hierbas. La cubierta de la cápsula de material vegetal agar o gelatina.

## GMP ESTÁNDAR

La línea de equipos cumple con todos los requisitos modernos para la producción de cápsulas blandas de aceite CANNABIS.

## SERVICIO

Aprendiendo paso a paso.  
Asesoramiento y asistencia en la creación de un negocio.

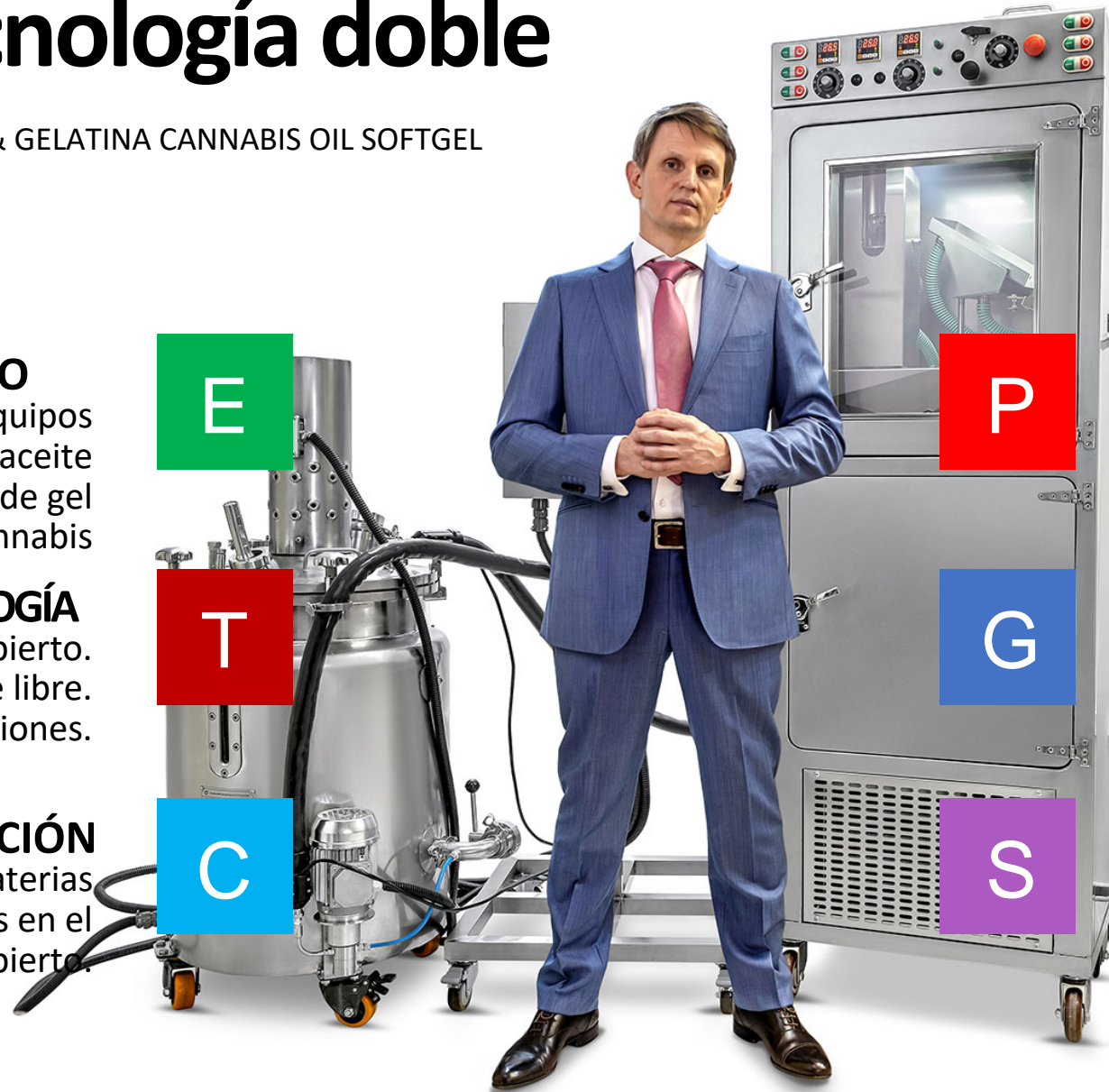

# CBD Encapsulador

EQUIPO CANNABIS DE PROFESIONALES



## Acerca de nuestra empresa


FUNDADA EN EUROPA 2018

Ofrecemos a nuestros clientes un know-how en todo el mundo. La maquinaria única Encapsulador para la producción de CBD, CANNABIS, HEMP oil softgels cápsulas, encapsulación de aceite en una tapa de cápsula, relleno de la cápsula de aceite. La producción recibida (cápsulas sin costuras) tiene el nombre - cápsulas veganas suaves sin costura. Introducimos activamente la nueva tecnología de capsulación que permite hacer cápsulas sin residuos de producción entre los productores de petróleo Cannabis. Teniendo la experiencia enorme de la producción de las cápsulas veganas, ayudamos a nuestros clientes hasta la salida de la producción acabada.

Toda la maquinaria encapsulada usada en esta tecnología es fabricada por nuestra compañía y hoy se queda al más accesible por el precio en el mercado farmacéutico de todo el mundo. La ventaja incondicional de un encapsulado es la alta eficiencia de la línea, el uso de materias primas de precio efectivo, la ausencia de defectos y la falta de desechos de producción.


# Características de las cápsulas de geles blandos

NUEVO DEL MERCADO CBD CANNABIS HEMP OIL

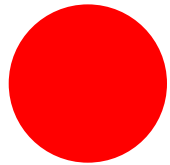


## Producto vegano y orgánico

La cáscara redonda de la cápsula está hecha de materias primas vegetales o gelatina. Algas NO OGM. ORGÁNICO. VEGANOS

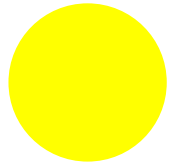


## Tamaño y forma de la cápsula

El diámetro de las cápsulas  
4-10 mm / 0,157-0,39 pulgadas.  
La dosis de aceite de Cannabis 20-400 mg en 1 cápsula / 0,0007-0,0141 onzas en 1 cápsula.

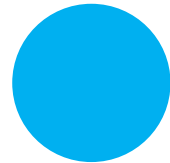

## Propiedades de Shell

El espesor de la carcasa de la cápsula es 0.02-0.1 mm / 0,00079 - 0,0079 pulgadas. Mastica fácilmente en la boca. Sabor a manzana.

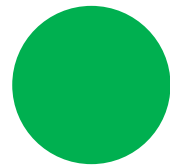

## Composición de Shell

Agar-agar (o gelatina), plastificante, colorante de alimentos, conservante, agua destilada.



# Ventaja

NUEVO PRODUCTO DE ACEITE DE CÁÑAMO CBD CANNABIS

## Concha muy delgada

La cápsula tiene una cantidad mínima de material de concha. Esta es una cantidad fantásticamente pequeña.  
Cápsulas del grueso de Shell  
0.02-0.1 mm / 0,00079 - 0,0079 pulgadas

## Sin oxígeno (O2) en el interior

La tecnología hace que las cápsulas de aceite de Cannabis sin una burbuja de aire en el interior. El aceite de Cannabis no se oxida durante mucho tiempo.

## La dosis de aceite de Cannabis 20-400 mg 0,0007-0,0141 oz

El consumidor puede usar la dosis mínima en forma de una cápsula de gel blando que se puede tomar en la mano.

## Diseño de alimentos

Las cápsulas de aceite de cannabis se pueden usar en la cocina molecular y pastelería para crear el efecto WOW.

## Efecto rápido

Las pequeñas cápsulas de gel suave redondas se pueden tragar fácilmente para niños, mascotas y personas con problemas de salud.

## Tipos de envases CBD aceite softgel

La forma de la cápsula le permite empacar productos en ampollas, botellas de plástico, bolsas de sobre, cajas de cartón. El embalaje individual es posible para una cápsula con aceite de Cannabis.

## Política de ahorro


En el proceso de producción de cápsulas de gel blando, la cantidad de desechos no es más del 1%. Le permite obtener el máximo beneficio.

## Mezcle Cannabis y otros aceites

La posibilidad de obtener dentro de una cápsula varios tipos de aceites cannabis.

# Etapas de producción

INTUITIVIDAD Y FACILIDAD DE USO EN CANNABIS BUSINESS

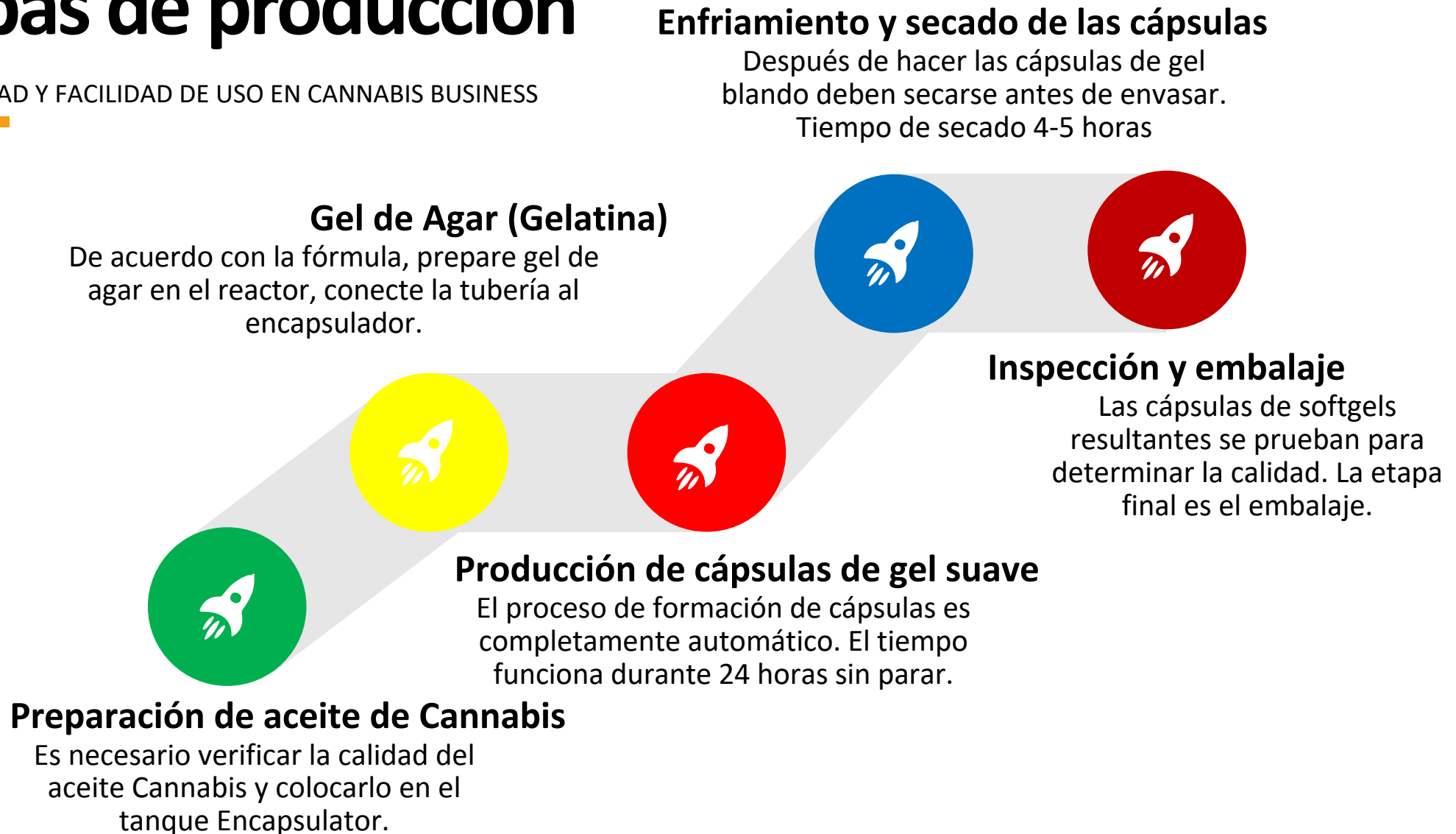

# Para la puesta en marcha y la fábrica

INVERSIÓN MÍNIMA PARA INICIAR LA FÁBRICA DE ACEITE DE CANNABIS




**Solo 2 litros / 0,53 gal de aceite de Cannabis como la carga mínima de equipo para la prueba o un pequeño lote de productos.**

- ✓ Colocación de equipos en un pequeño laboratorio o sala de Cannabis.
- ✓ La capacidad de mantener el equipo por 2 empleados.
- ✓ Tamaño compacto y peso del equipo, ruedas para moverse por la habitación.
- ✓ Fácil de manejar y limpiar. Se puede usar tanto en el laboratorio como en la producción industrial de cápsulas.

# Cápsulas de gel suave Battle Cannabis

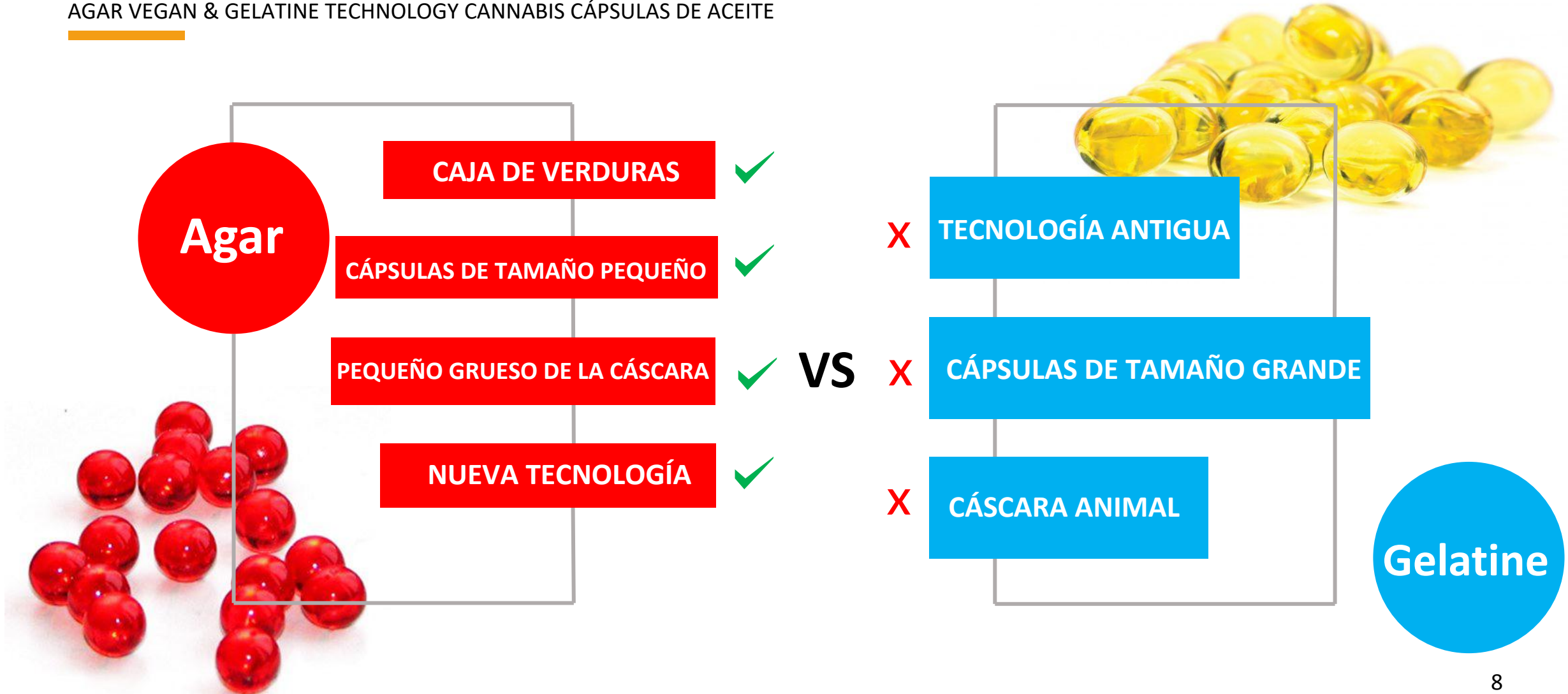

AGAR VEGAN & GELATINE TECHNOLOGY CANNABIS CÁPSULAS DE ACEITE






# Especificación de cápsulas

EL TAMAÑO Y LA DOSIFICACIÓN CANNABIS OIL SOFTGELS

<b>3MM</b> 0.12INCH  <b>13,14MG</b> 0.0004oz	<b>4MM</b> 0.16INCH  <b>31,16MG</b> 0.001oz	<b>5MM</b> 0.19INCH  <b>60,86MG</b> 0.002oz	<b>6MM</b> 0.24INCH  <b>105,18MG</b> 0.004oz
<b>7MM</b> 0.27INCH  <b>166,93MG</b> 0.006oz	<b>8MM</b> 0.31INCH  <b>249,31MG</b> 0.008oz	<b>9MM</b> 0.35INCH  <b>354,90MG</b> 0.012oz	<b>10MM</b> 0.39INCH  <b>487,30MG</b> 0.017oz

## TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

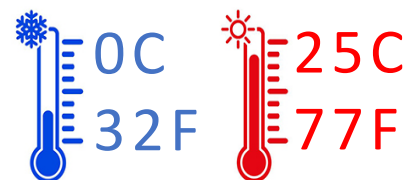


- # NUEVA TECNOLOGÍA EN EL MERCADO DE CANNABIS
- # SHELL DE UNA CÁPSULA DE GEL SUAVE HECHO DE ALGAE
- # AMIGABLE VEGANO Y VEGETARIO
- # PARA REGIONES CON CLIMAS HÚMEDAS Y CALIENTES
- # AHORRO DE ENERGÍA Y SIN RESIDUOS
- # EL USO DE CONSERVANTES ORGÁNICOS SEGUROS
- # CÁPSULA SUPER FUERTE Y MÍNIMAMENTE DELGADA
- # ALTA PRECISIÓN DE LA DOSIS DE ACEITE DE CÁÑAMO CBD CANNABIS



# Hasta 90 000 cápsulas / 1 hora

PRECIO DE CÁLCULO DE COSTOS EQUIPO

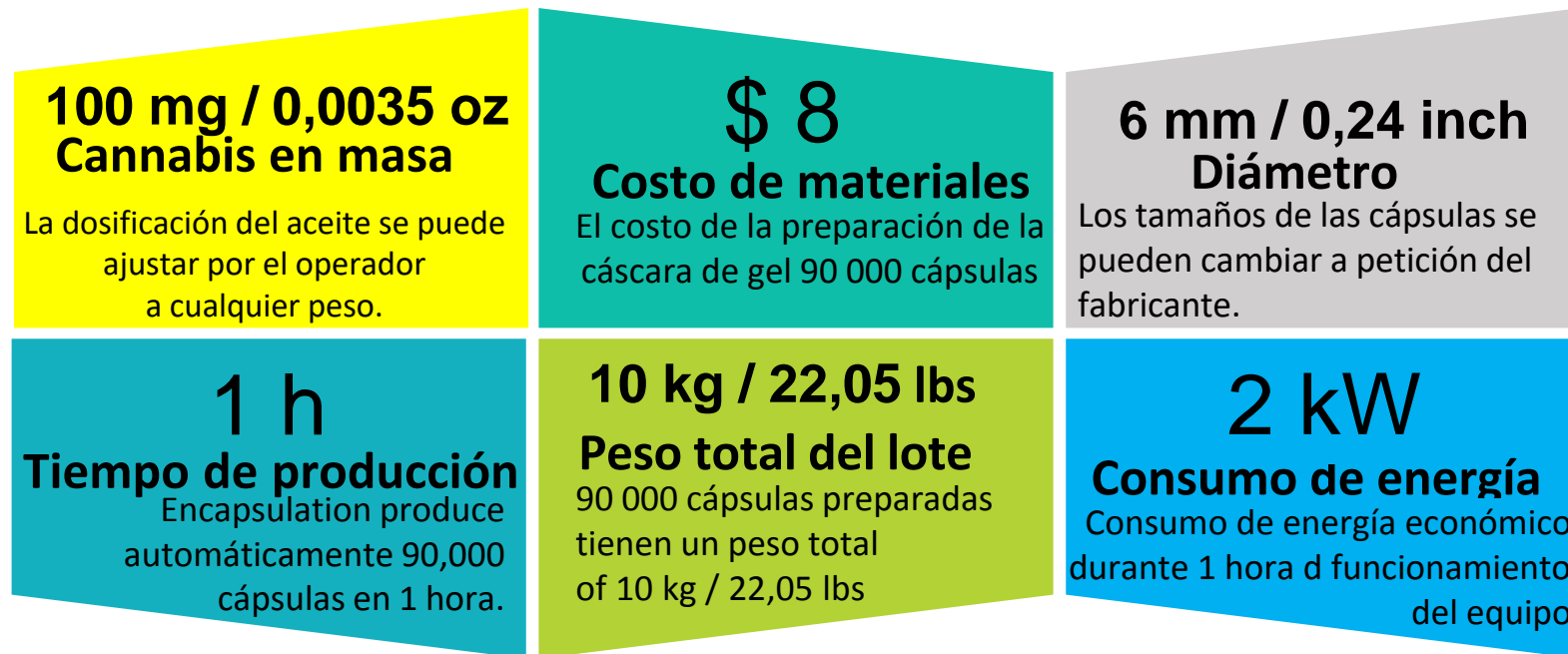

# Especificación

INFORMACIÓN DE ACEITE ENCAPSULADOR CANNABIS

## Capacidad

90 000 cápsulas por 1 hora  
720 000 cápsulas / día laborable  
80 kg cápsulas / día laborable  
176,37 lbs cápsulas / día laborable

## Temperatura de trabajo

Gel de agar de temperatura de calentamiento máximo + 100 C/212 F.  
Temperatura de enfriamiento del aceite- 5 C / 23 F

## Reglas de opción

El tiempo de trabajo recomendado es de 12 horas por turno. Modo continuo las 24 horas del día.



# Modelo GMP

## Material

Todas las partes del equipo están hechas de acero inoxidable AISI304 y AISI316. GMP.

## Tensión de alimentación

Potencia de 2,5 kW  
UU., Reino Unido, Canadá 110V  
para otros países 220 V

## Tamaño y peso

Tamaño 900x900x1950 mm  
Tamaño 35,43x 35,43x76,77 pulgadas.  
Peso neto 250 kg / 551,15 lbs  
P/Peso 300 kg / 661,39 lbs.

# Costo del equipo (Encapsulador)

CÁLCULO DE COSTOS DE LA ENCAPSULADORA



**\$ 42000**

PRECIO PARA LAS GRANDES EMPRESAS

**Encapsulador  
MODELO GMP**

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 90 000 CÁPSULAS / 1 HORA



**\$ 32000**

PRECIO PARA UNA ARRANQUE Y LABORATORIO

**Encapsulador  
MODELO GMP**

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 15 000 CÁPSULAS / 1 HORA



# Equipamiento opcional

LÍNEA DE DESCRIPCIÓN

## Preparación del gel para 1 día de trabajo

Para la preparación de gel de agar 50 L/ 13,21 gal Temperatura de calentamiento +100 C / 212 F

**Tanque de gel**

## Eliminación de aceite residual de la cáscara de la cápsula de aceite cannabis

Carga 2 kg / 4,41 lbs cápsulas La velocidad de rotación no es más de 400 revoluciones por minuto.

**Centrífuga**

## Eliminación de aceite residual de la superficie de la cápsula

Carga 2 kg /4,41 lbs. Tiempo de lavado 1-2 minutos.

**Lavadora de cápsulas**

## Proceso de secado de la colocación de la cápsula

60 bandejas de plástico para el proceso de secado de la distribución del cbd de la cápsula.

**Sistema de secado**

# Equipamiento opcional

50 LITROS DEPÓSITO DE GEL

## VOLUMEN

50 LITROS / 3,21 gal

Agitador giratorio para mezcla de gel

Monitoreo de la temperatura

Sistema de control de

calefacción eléctric

## TEMPERATURA

Temperatura de calentamiento

agar gel max + 100 C/212 F

Acero inoxidable AISI 304 y 316

## OPCIÓN ADICIONAL

Bomba especial del gel

Mangueras calentadas 2

piezas y 3 metros

Gabinetes eléctricos móviles



# Tanque de gel MODELO GMP

**SPECIAL  
PRICE**


**\$ 14000**

# Equipamiento opcional

ACEITE CENTRIFUGADOR CANNABIS


## VOLUMEN

5 LITROS / 1,32086 gal  
Ajuste de velocidad  
una parada de arranque suave

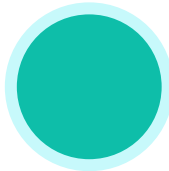


## MATERIAL

Acero inoxidable AISI 304

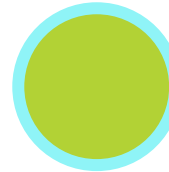

## OPCIÓN ADICIONAL

Construcción sobre ruedas  
Fácil de lavar y usar

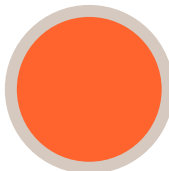

# CENTRIFUGADOR MODELO GMP



\$ 4000



# Buscar personal de mantenimiento

ENCONTRAR PERSONAL Y FUNCIONES CANNABIS FÁBRICA DE CÁPSULAS DE ACEITE



## ➤ Aceite de tecnólogo cannabis

Hombre o mujer. Educación en el campo de la producción alimentaria o farmacéutica.

Control de materias primas entrantes.

Preparación de gel y carga de aceite de Cannabis. Revise las primeras muestras de cápsulas y ajuste el gel.

Control de calidad antes de embalar cápsulas.

## ➤ Encapsulador cannabis del mecánico

Hombre. Deshable técnicas. Buena visión sin gafas. La atención. Capacidad para operar maquinaria y equipo.

Preparación de equipos para el trabajo.

Conexión de equipos adicionales.

Actuando como operador de equipos.

Equipos de limpieza y prueba.

# Plazas para su fábrica de cápsulas de aceite de Cannabis

## FUNCIONES DE LA SALA DE FÁBRICA

1

### Laboratorio

Area from 100 ft<sup>2</sup>/ 10 m<sup>2</sup>

Parámetros de control de los materiales entrantes. Preparación de gel.  
Cápsulas de filtro de aceite de cocina.  
Controla la viscosidad del gel.

2

### Warehouse

Area from 100 ft<sup>2</sup>/ 10 m<sup>2</sup>

Almacén de materiales entrantes. Almacén de productos terminados.

3

### Sala de producción

Area from 160 ft<sup>2</sup>/ 15 m<sup>2</sup>

Producción de cápsulas de aceite de Cannabis.  
Colocación de toda la línea de producción.  
Encapsulador y equipo adicional.

4

### Baño

Area from 100 ft<sup>2</sup>/ 10 m<sup>2</sup>

Limpieza de la superficie de las cápsulas. Preparación de cápsulas para el secado.

5

### Sitio de sequía de la cápsula

Area from 100 ft<sup>2</sup>/ 10 m<sup>2</sup>

Bastidores para colocar las cápsulas en el momento del secado. Preservación de la temperatura deseada, la separación de la humedad del aire, ventilación del aire.

6

### Sala de embalaje

Area from 100 ft<sup>2</sup>/ 10 m<sup>2</sup>

Control visual de la calidad de las cápsulas terminadas. Verifique el peso, el grosor del caparazón. Equipo de embalaje listo cápsulas.


# Buscar clientes

CLIENTES Y SOCIOS

## Comience el negocio del petróleo Cannabis en todo el mundo



Invitamos a la cooperación cualesquiera compañías en todos los países del mundo.

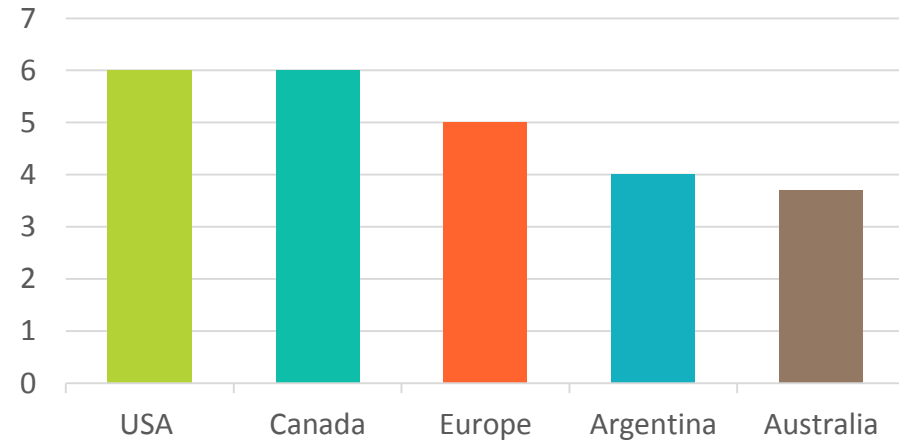

Somos los pioneros del equipamiento y la tecnología de las cápsulas veganas Cannabis. Estamos abiertos a todos.

# Empresa - Soft Gel Capsules Technologies Co.Limited

## INFORMACIÓN DE CONTACTO



*CEO Mr.Roman Tsibulsky*

**EUROPE**

**Hong Kong**



**Contacto:**

**WhatsApp +375293080000**

**Telegram +375293080000**

**Mobile +375293080000**

**Skype:**

**Romantsibulsky**



[manager@capsulesforyou.com](mailto:manager@capsulesforyou.com)

[info@capsulesforyou.com](mailto:info@capsulesforyou.com)

